

от 3 до 10 лет

от 8 до 14 лет

«Майгоу»

Ортопедическое функциональное кресло



Кресло «Майгоу» подходит для детей со средним и тяжелым уровнем функциональных нарушений. Ребенок надежно стабилизируется в этом кресле в симметричном положении и имеет возможность активно участвовать в повседневной жизни и выполнять связанные с этим задачи.

Кресло «Майгоу» моделирует правильную позу у детей с двигательными нарушениями даже при развивающихся контрактурах. Его использование обеспечивает ребенку надежное и комфортное положение сидя. Изменение угла наклона, как самого кресла, так и спинки отдельно от сиденья позволяет использовать его длительное время в течение дня при выполнении различных активностей.

Основные характеристики:


- ✓ Изменяются ширина и глубина сиденья, высота спинки, длина подножки
- ✓ Изменяются угол наклона спинки и кресла
- ✓ Подстраивается по высоте и углу наклона подголовник
- ✓ Меняется положение боковин поддержки плечевого пояса (при наличии)
- ✓ Меняется положение подлокотников по высоте и углу наклона
- ✓ Подстраиваются по ширине, высоте боковые поддержки (при наличии)
- ✓ Регулируется степень натяжения фиксатора таза
- ✓ Изменяется угол наклона поддержки поясничного отдела
- ✓ Конструкция сиденья позволяет выбирать необходимый угол отведения каждой ноги
- ✓ Регулируется угол наклона отдельных подножек относительно сгибания в коленном и голеностопном суставе
- ✓ Колесики шасси фиксируются при помощи индивидуальных тормозов
- ✓ Регулируется высота кресла (при наличии шасси с регулировкой высоты)

Кресло «Майгоу» легко крепится как на комнатное, так и на уличное шасси и может использоваться в качестве прогулочной коляски.

Аксессуары:

- ✓ Варианты подголовников для поддержки и правильного положения головы
- контурный подголовник
- плоский подголовник с боковыми поддержками
- ✓ Поддержка плечевого пояса (входит в стандартную комплектацию к Майгоу размер 2)
- ✓ Боковые поддержки туловища (отводящиеся, фиксированные)
- ✓ Грудной фиксатор по типу «майка»
- ✓ Грудной фиксатор овальный (при наличии боковых поддержек)
- ✓ Модуль фиксации таза
- ✓ Боковые поддержки таза (используются с модулем фиксации таза)
- ✓ Мягкие фиксаторы коленей
- ✓ Сандалии для фиксации стоп
- ✓ Столик
- ✓ Мягкая вкладка для столика
- ✓ Планка для столика
- ✓ Вкладки в сандалии для уменьшения высоты подножки
- ✓ Дополнительный матрасик 2,5 см с фиксированными боковыми поддержками для уменьшения размера кресла
- ✓ Крыша от солнца (только с шасси Кимба)

Технические характеристики	Размер 1	Размер 2
• Возраст	от 3 до 10 лет	от 8 до 14 лет
• Максимальная нагрузка	50 кг	60 кг
• Рост	105–150 см	127–168 см
• Ширина сиденья	20–32,5 см	22–34,5 см
• Глубина сиденья	27–42 см	35–47 см
• Ширина колена	9–11 см	12–14 см
• Угол регулировки подножки	10°	10°
• Ширина туловища	17–27 см	17–27 см
• Высота спинки	36–47 см	46–57 см
• Угол наклона спинки	-10° – +25°	-10° – +25°
• Высота подножки	21,5–35 см	31,5–47 см
• Изменение угла наклона сиденья	-10° – +25°	-10° – +25°
• Высота сиденья (шасси с регулировкой высоты)	34/65,5 см	34/65,5 см
• Высота подлокотников	16–21 см	21–26 см
• Размеры столика	55 x 48 см	55 x 48 см
• Высота шасси (с механической регулировкой)	34–65,5 см	34–65,5 см
• Высота шасси (с электронной регулировкой)	37–67,5 см	37–67,5 см
• Вес сиденья	10 кг	14,5 кг
• Вес шасси	12 кг	12кг

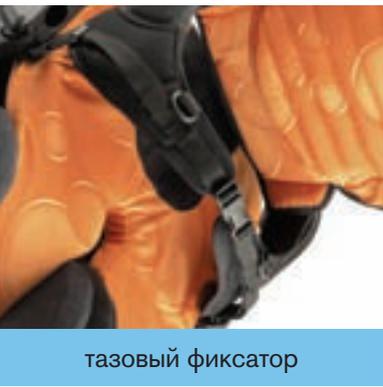

цвета обивки

