

Xeno

Кресло-коляска с функцией вертикализации



На фото кресло-коляска в комплектации с боковыми поддержками, мягкими опорами под голени, багажником, пультом с функцией параллельного отведения, электроосвещением, подголовником, LCD-дисплеем на гибком держателе

Краш-тест
в соответствии с
ANSI/RESNA

Кресло-коляска Хепо с функцией вертикализации дает пользователю чувство мобильности, независимости, а также возможность находиться на одном уровне с другими. Положение стоя оказывает положительное влияние на общее состояние организма и является одним из важных методов профилактики вторичных осложнений, а система поддержек и фиксаторов обеспечивает безопасность даже при использовании функции вертикализации во время движения.

Ключевые особенности


- Функция вертикализации.
- Движение в вертикальном положении.
- Ширина и глубина сиденья легко настраиваются.
- Инновационная система независимого привода поворотных колес Servo.
- Биомеханическое строение спинки, предотвращающее трение во время активации функции вертикализации.
- Подходит для использования дома и на улице.



• Функция вертикализации



• Боковые поддержки для большей стабильности

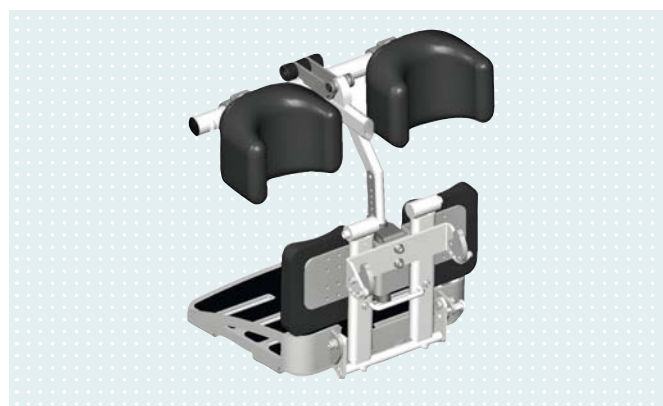

• Комфортные фиксаторы коленей для большего удобства и безопасности

Стандартная комплектация

- Скорость 6 км/ч.
- Гелевые батареи 63 Ah (C5).
- Контроллер enAble50 (130 A).
- Сиденье с функцией вертикализации, включая подлокотники и подножки.
- Обшивка сиденья и спинки серая / черная.
- Поясной ремень, 4-точечный ремень.
- Мягкий фиксатор коленей.
- Секция для аккумуляторов для удобства в обслуживании.
- Инновационная система Servo (S³).
- Передние колеса 9 дюймов.
- Черные диски.
- Покрышки с глубоким протектором, серые.
- Амортизаторы приводных колес.
- Зарядное устройство.
- Варианты цвета рамы: ультрамариновый синий (Marine blue), серебряный металлик (Stainless steel silver), красный перламутровый (Candy red), оранжевый перламутровый (Sparkle light orange), черный (Jet black RAL 9005).

Дополнительные опции

- Скорость 10 км/ч.
- Специальные элементы альтернативного управления креслом-коляской (управление подбородком, дыханием, клавиатурой, пультом для сопровождающего лица).
- Максимальный вес пользователя 180 кг.
- Стандартное сиденье Junior / XL; контурное сиденье малое / большое / XL; Rescaro сиденье.
- Механическая или электрорегулировка угла наклона спинки до 30°.
- Электрорегулировка угла наклона сиденья до 30° или 45°.
- Электрорегулировка высоты сиденья до 40 см.
- Электрорегулировка угла наклона подножек.
- Амортизаторы на передние колеса.
- Фиксатор положения передних колес.
- Устройство для преодоления препятствий.
- Другие цвета по запросу пользователя.



• Цветной дисплей



• Электронная регулировка угла наклона спинки 20° (опционально)

Индивидуальные решения

- Фиксаторы коленей с регулировкой высоты.
- Оснащение для хоккея e-Hockey («ALU» спортивный бампер, боковая защита, клюшка).

Нестандартные решения

- Электрорегулировка поддержки для ног.
- Электрорегулировка угла наклона спинки 45°.



• Система независимого привода поворотных колес Servo



• Фиксатор грудного отдела



• Фиксатор коленей



• Откидные подлокотники



• Электрорегулировка угла наклона сиденья 15°



• Съемный багажник



• Задние фары LED



• Панель управления enAble50

Технические характеристики	
Скорость	6 / 10 км/ч
Аккумуляторные батареи	63 Ah (C5) гелевые
Запас хода	до 35 км
Контроллер	enAble50 (130 A)
Максимальный вес пользователя	136 кг
Максимальная высота преодолеваемых препятствий	5 см
Угол подъема	17%
Общая длина, включая подножки	101 см

Общая ширина	65 см
Радиус разворота	92 см
Высота сиденья (без подушки)	53 – 63 см
Ширина сиденья	43 / 48 см
Глубина сиденья	37 – 53 см
Угол наклона спинки	20°, электрорегулировка
Угол наклона сиденья	15°, электрорегулировка
Высота спинки	55 – 65 см
Высота подлокотников	16 – 26 см
Длина подножки	39 – 52 см